



2797

## Ponovna obdelava kirurških instrumentov

00-501-944-02 Rev. E  
Datum izdaje: 2021-05surveillance@incipiodevices.com  
www.incipiodevices.comVelja samo, če je pritrjeno  
na etiketo ali izdelek.Incipio Devices LLC  
3650 West 200 North • Huntington IN 46750 • ZDAMDSS GmbH  
Schiffgraben 41 • 30175 Hannover • Nemčija

SL

SLOVENSKO

**Predvideni namen**

Instrumenti družbe Incipio Devices obsegajo medicinske pripomočke za večkratno uporabo in njihovi dodatki, namenjeni uporabi pri ortopedskih kirurških posegih. Instrumente družbe Incipio Devices lahko uporablja le usposobljeno osebje, ki je v celoti usposobljeno za ravnanje in uporabo kirurških pripomočkov ter za ustrezne kirurške postopke.

**Splošne varnostne opombe**

- Dodatne informacije v zvezi z uporabo, sestavljanjem in razstavljanjem kirurških instrumentov družbe Incipio Devices ter prevodi teh navodil za uporabo v dodatne jezike so na voljo na spletnem mestu ([www.incipiodevices.com](http://www.incipiodevices.com)).
- Pred klinično uporabo mora kirurg temeljito razumeti vse vidike kirurškega postopka in omejitve instrumentov.
- Dolžnost uporabnika je poskrbeti za upoštevanje postopkov za ponovno obdelavo, zagotoviti, da so viri in materiali na voljo usposobljenemu osebju ter da se upoštevajo bolnišnični protokoli in politike.
- Uporabniki morajo med obdelavo pripomočkov vedno nositi predpisano osebno zaščitno opremo.
- Pladnji za instrumente družbe Incipio Devices niso namenjeni ohranjanju sterilnosti svoje vsebine. Zdravstveno osebje mora za zagotovitev sterilnosti pladnja in njegove vsebine uporabljati ustrezno embalažo.
- O vsakem resnem dogodku ali nepravilnem delovanju kirurških instrumentov Incipio Devices, ki ima ali bi lahko imel za posledico resne poškodbe pacienta in/ali uporabnikov, morate poročati družbi Incipio Devices in nacionalnemu regulativnemu organu države, v kateri ima uporabnik sedež, v skladu z veljavnimi predpisi.

**Opozorila**

- Pri ravnanju s kirurškimi instrumenti z ostrimi robovi morate paziti, da ne prerežete kirurških rokavic, in upoštevati tveganje okužbe, če do prereza pride.
- Instrumenti proizvajalca Incipio Devices so dobavljeni nesterilni in jih je treba pred vsako uporabo očistiti in sterilizirati.
- V primeru suma okužbe s prioni, instrument varno zavržite v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi. Ne uporabljajte ponovno.
- Instrumenti so na voljo v enem pakiranju, v ovojnici ali pretisnem omotu. Identifikacija izdelka je označena na zunanji etiketi. Izdelka ne uporabite, če je embalaža poškodovana.
- Vse instrumente pred čiščenjem in sterilizacijo vzemite iz embalaže. Prav tako odstranite morebitne zaščitne pokrovčke ali folije.
- Instrumenti ne smejo priti v stik z izdelki, ki vsebujejo fluoride ali kloride in z detergenti na osnovi maščob. Instrumenti s sintetičnimi (plastičnimi) sestavnimi deli ne smejo biti v stiku z raztopinami močnih kislin (pH < 4), alkalijami, z organskimi ali topili na osnovi amoniaka ter z oksidativnimi kemikalijami ali drugimi snovmi, ki bi lahko negativno vplivale na material.
- Mešanje instrumentov ali sestavnih delov različnih proizvajalcev ni priporočljivo in lahko povzroči težave z združljivostjo, delovanjem ali zmogljivostjo. Družba Incipio Devices zavrača vsakršno odgovornost v primeru uporabe nezdružljivih instrumentov ali komponent iz različnih virov.

**Nega na mestu uporabe**

- Med kirurškim posegom z naprave sproti obrišite kri in ostanke, da se ne posušijo na površini. Instrumente s cevkami splaknite s sterilno vodo, da preprečite sušenje materiala in/ali ostankov v notranjosti.
- Instrumente je treba predhodno očistiti neposredno po uporabi (v 2 urah, da se ne zasušijo).

**Osnove čiščenja in razkuževanja**

- Če je mogoče, je treba za čiščenje in razkuževanje instrumentov uporabiti samodejni postopek čiščenja in razkuževanja. Ročni postopek, tudi v primeru uporabe ultrazvočne kopeli, se uporablja le, če samodejni postopek ni na voljo.
- V obeh primerih morate opraviti postopke dekontaminacije/predčiščenja.

**Priprava za dekontaminacijo/predčiščenje**

- Pred čiščenjem, razkuževanjem in sterilizacijo instrumente z odstranljivimi deli razstavite ali jih popolnoma odprite. Če je potrebno, glejte posebna navodila za razstavljanje, ki ste jih dobili z instrumentom.
- Vse instrumente je treba pred čiščenjem in razkuževanjem ročno obdelati neposredno po uporabi (v dveh urah, da se ne zasušijo). Bodite posebej pozorni na lumne/kanile instrumentov.
- Pred čiščenjem instrumente namočite in/ali sperite, da odmočite vidno umazanijo ali ostanke. Za namakanje instrumentov uporabite sveže pripravljeno encimsko čistilno sredstvo (pH ≤ 8,5). Upoštevajte navodila proizvajalca detergenta glede koncentracije, temperature in časa namakanja. Pri čiščenju si pomagajte s krtačenjem s ščetko z mehкими ščetinami. Ne uporabljajte jeklene volne ali abrazivni čistil.
- Za izpiranje instrumentov uporabite hladno vodo iz vodovoda (< 40 °C/104 °F) najmanj 1 minuto.

**Samodejno čiščenje in razkuževanje v stroju za pranje/razkuževanje**

- Pred uporabo spodaj navedene samodejne metode je treba opraviti korake dekontaminacije/predčiščenja.
- Razstavljene instrumente položite v stroj za pranje/razkuževanje tako, da se ne dotikajo drug drugega.
- Prepričajte se, da so vse konstrukcijske značilnosti pripomočkov dostopne za čiščenje, da so vsi tečaji odprti in da voda lahko odteka iz vseh kanal in odprtin.
- Sprožite standardni cikel pranja/razkuževanja instrumentov z naslednjimi minimalnimi parametri:

Cikel	Čas izpostavljenosti	Temperatura:	Detergent
Predpranje	2 minuti	Hladna voda iz vodovoda (< 40 °C/104 °F)	Ni na voljo
Pranje	5 minut	> 60 °C (140 °F)	Nevtralni pH encimski detergent
Nevtralizacija	2 minuti	Hladna voda iz vodovoda (< 40 °C/104 °F)	Ni na voljo
Spiranje	1 minuta	Hladna voda iz vodovoda (< 40 °C/104 °F)	Ni na voljo
Toplotno razkuževanje	5 minut	> 90 °C (194 °F)	Ni na voljo
Sušenje	7 - 30 minut	Vroč zrak 100-120 °C (212-248 °F) Ni na voljo	Ni na voljo

- Poglejte, da na instrumenti ni vidnih ostankov. Če jih opazite, čiščenje ponovite.
- Upoštevajte navodila proizvajalca detergenta glede koncentracije, temperature in časa namakanja.
- Upoštevajte navodila za uporabo in priporočene smernice proizvajalca stroja za pranje/razkuževanje. Uporabljajte samo stroje za pranje/razkuževanje, ki so odobreni skladno z ISO 15883. Stroj za pranje/razkuževanje mora biti pravilno nameščen, vzdrževan in kalibriran.

### Ročno čiščenje in razkuževanje

- Predhodno očiščene instrumente intenzivno spirajte pod tekočo hladno vodo iz vodovoda (< 40 °C/104 °F) najmanj 2 minuti z uporabo brizgalne pištole.
- Instrumente potopite v sveže pripravljeno raztopino encimskega čistilnega detergenta (pH ≤ 8,5). Upoštevajte navodila proizvajalca detergenta glede koncentracije, temperature in časa namakanja ter spiranja po namakanju. Posebej pozorni bodite na popolno namakanje lumnov z zibanjem. Za pomoč pri čiščenju uporabite krtačko z mehкими ščetinami (popolno ščetkanje vseh notranjih in zunanjih površin). Za čiščenje instrumentov s kanilami premikajte najlonsko krtačko med vrtenjem skozi kanile. Ne uporabljajte jeklene volne ali abrazivni čistil. Aktivirajte spoje, ročaje in druge premične dele pripomočkov tako, da izpostavite vse površine raztopini detergenta.
- Pri pipah ali drugih instrumentih z globokimi utori ali zapleteno geometrijo si pomagajte pri čiščenju z ultrazvočno obdelavo pri frekvenci 35 kHz za enak čas, kot je bil uporabljen za začetno namakanje.
- Instrumente vzemite iz čistilne raztopine in jih vsaj trikrat po najmanj eno minuto temeljito spirajte z deionizirano ali prečiščeno vodo. Posebej bodite pozorni na temeljito namakanje in zibanje lumnov, kanil in drugih, težko dosegljivi delov. Aktivirajte spoje, ročaje in druge premične dele pripomočkov tako, da jih lahko temeljito sperete.
- Instrumente potopite v sveže pripravljeno raztopino encimskega razkužila. Upoštevajte navodila proizvajalca detergenta glede koncentracije, temperature in časa namakanja ter spiranja po namakanju. Posebej pozorni bodite na popolno namakanje lumnov z zibanjem. Aktivirajte spoje, ročaje in druge premične dele pripomočkov tako, da izpostavite vse površine raztopini razkužila.
- Instrumente vzemite iz raztopine razkužila in jih vsaj trikrat po najmanj eno minuto temeljito spirajte z deionizirano ali prečiščeno vodo. Posebej bodite pozorni na temeljito namakanje in zibanje lumnov, kanil in drugih, težko dosegljivi delov. Aktivirajte spoje, ročaje in druge premične dele pripomočkov tako, da jih lahko temeljito sperete.
- Instrumente vizualno pregledajte in po potrebi ponovite postopek čiščenja, dokler na instrumentih ni več vidne umazanije. Vdolbine in skrite površine morate skrbno pregledati in poskrbeti, da so ujeti ali drugi preostali materiali v celoti odstranjeni.
- Instrumente posušite s svežo, čisto in mehko tkanino, ki ne pušča vlaken. Ostanke vode preprečite z izpihovanjem votlin instrumentov s čistim stisnjenim zrakom, brez olja in delcev.

### Pregled

- Instrumente družbe Incipio Devices morate pregledati po obdelavi in pred sterilizacijo.
- Skrbno pregledajte vsak instrument posebej in se prepričajte, da so bili vsi ostanki krvi in nečistoč res odstranjeni.
- Instrumente vizualno pregledajte in bodite še posebej pozorni na poškodbe, obrabo in/ali rjo. Če ste opazili poškodbe, obrabo in/ali rjo, ki bi lahko ogrozila delovanje instrumenta, ga ne uporabite in obvestite odgovorno osebo.
- Pregledajte delovanje gibljivih delov in se prepričajte, da se gladko premikajo v celotnem predvidenem območju gibanja.
- Prepričajte se, da instrumenti z dolgimi in vitkimi elementi (zlasti vrtljivi instrumenti) niso deformirani.
- Instrumenti z varjenimi spoji, ki so med uporabo izpostavljeni mehanskim obremenitvam ali vibracijam, lahko sčasoma oslabijo. Pred uporabo skrbno pregledajte varjene spoje, da se na njih niso pojavile razpoke.
- Instrumenti za rezanje lahko s ponovljeno uporabo izgubijo ostrino. Pazite, da rezalni robovi niso poškodovani (zareze, zlomi, korozija) in da niso vidni znaki obrabe. Topi rezalni robovi zahtevajo večjo silo za doseganje zelenega reza in lahko povzročijo poškodbo pacienta.
- Pri instrumentih in napravah, ki vsebujejo polimerne sestavne dele, se morate prepričati, da na površini ni večjih poškodb (npr. razpok, razslojenosti, razpokanosti), deformacij ali zvitosti.
- Če so instrumenti del večjega sklopa, se prepričajte, da se naprave zlahka sestavijo z ustreznimi sestavnimi deli.

### Vzdrževanje

- Ponavljajoča se obdelava, ki vključuje dekontaminacijo, čiščenje in sterilizacijo, ima minimalne učinke na instrumente. Življenjsko dobo izdelka določajo obraba in poškodbe, ki so posledica njegove rabe. Pogosto uporabljene instrumente morate redno menjati.
- Pripomočki za omejevanje navora, momentni ključji in podobni instrumenti zahtevajo poseben pregled točnosti in/ali ponovno kalibracijo. Upoštevajte navodila, ki so navedena v kirurški tehniki, ali navodila distributerja.
- Tečaje, navoje in druge gibljive dele namažite s komercialnim mazivom za kirurške instrumente na vodni osnovi. Tako zmanjšate trenje in obrabo. Upoštevate navodila proizvajalca maziva. Olja ali masti za instrumente ne smete uporabiti.

### Embalaza

- Očiščene in razkužene instrumente zapakirajte v razstavljenem stanju.
- Za pakiranje posameznih instrumentov uporabite dvojne ustrezno velike medicinske vrečke za enkratno uporabo za parno sterilizacijo.

- Pri pakiranju instrumentov na pladnje za instrumente s pokrovom uporabite medicinski ovitek za parno sterilizacijo po metodi dvojnega ovijanja. Pladnji za instrumente s pokrovom se lahko za sterilizacijo postavijo tudi v odobreno posodo za sterilizacijo s tesnilnim pokrovom.
- Embalaža in ovoj morata ustrezati standardu EN ISO 11607 in biti primerna za parno sterilizacijo (temperaturna odpornost do najmanj 138 °C (280 °F) in zadostna prepustnost za paro).

### Sterilizacija

- Instrumenti družbe Incipio Devices so namenjeni sterilizaciji s postopkom parnega avtoklaviranja (predvakuumiranje - vsaj trije vakuumski cikli/frakcionirani vakuumski postopek), ki se redno uporablja v bolnišnici (v skladu z EN 285/EN 13060, validirano v skladu z EN ISO 17665-1).

Cikel	Čas izpostavljenosti	Temperatura:
Predvakuum	4 - 18 minut	132/134 °C (270/273 °F)

- Uporaba postopkov ETO sterilizacije, hladne sterilizacije in hitre sterilizacije ni dovoljena. Družba Incipio Devices zavrača vsakršno odgovornost za kakršnekoli težave zaradi uporabe teh postopkov sterilizacije.
- Trenutni priporočeni časi sušenja za ohišja Incipio Devices se lahko gibljejo od standardnih 20 minut do podaljšanih 60 minut. Čas sušenja je lahko zelo različen zaradi razlik v sistemu sterilni pregrad in velikosti celotne polnitve. Za potrditev ustreznosti sušenja naj uporabnik uporabi preverljive metode (npr. vizualni pregled).
- Prepričajte se, da indikator sterilizacije v košari potrjuje, da je bila vsebina sterilizirana.
- Instrumenta ne uporabite, če je še vroč. Poskrbite, da so instrumenti pred začetkom kirurškega posega ohlajeni na sobno temperaturo.
- Glede največje polnitve za sterilizacijo upoštevajte navodila za uporabo in priporočene smernice proizvajalca avtoklava. Avtoklav mora biti pravilno nameščen, vzdrževan in kalibriran. Končni uporabnik sme uporabljati samo odobreno opremo za sterilizacijo in odobrene ovitke/vrečke. Samo končni uporabnik je odgovoren za čistočo in sterilne pogoje instrumentov. Vsekakor je treba absolutno upoštevati zakonske zahteve in higienske predpise vsake posamezne države.

### Shranjevanje in ravnanje

- Kirurški instrumenti so občutljivi za poškodbe. Tudi majhne površinske praske lahko povečajo obrabo in nevarnost korozije. Z instrumenti vedno ravnajte previdno.
- Prostori za shranjevanje kirurških instrumentov morajo biti odmaknjeni od vlažnih območij. Tako se prepreči prekomerna korozija. To priporočilo velja tudi za transport in embalaranje kirurških instrumentov.
- Sterilizirane instrumente shranjujte v suhem, čistem in brezprašnem okolju pri temperaturi med 5 °C in 40 °C (41 °F do 104 °F).



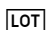





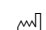

### Odlaganje

Obrabljene in poškodovane instrumente morate pred odstranitvijo temeljito očistiti in razkužiti v skladu z operativnimi postopki zdravstvene ustanove in v skladu z lokalnimi predpisi.

### Pomembno obvestilo

Kakršnekoli modifikacije instrumentov proizvajalca Incipio Devices so strogo prepovedane. Kompetence za izvedbo takšni del ima izključno družba Incipio Devices. Če tega priporočila ne upoštevate, družba Incipio Devices zavrača vsakršno odgovornost za morebitne posledice.

### Simboli

	Kataloška številka		Nesterilno
	Številka lota		Pooblaščen predstavnik
	Hranite na suhem prostoru		Pozor
	Proizvajalec		Glejte navodila za uporabo.
	Datum proizvodnje		Namenjeno izključni uporabi usposobljenega zdravnika.